

# TEST CANNABIS SU URINA

## • Generalità

La cannabis è una droga allucinogena che modifica le percezioni sensoriali, il coordinamento delle funzioni motorie e della memoria. Qualsiasi azione che richieda attenzione diventa pertanto rischiosa, in particolare la guida di un veicolo. Degli studi hanno dimostrato che i conducenti che hanno consumato cannabis nelle tre ore precedenti hanno un rischio maggiore di un incidente con collisione. Il TEST CANNABIS SU URINA MEDISUR è un test rapido che rileva il consumo di cannabis in 5 minuti e le consente di autocontrollarsi prima di mettersi al volante di un veicolo o adattare il suo comportamento di consumo.

In seguito al consumo di cannabis, i suoi derivati chimici sono eliminati nelle urine: il TEST CANNABIS SU URINA MEDISUR rileva questi derivati. Il TEST CANNABIS SU URINA MEDISUR consente di rilevare sia i consumatori occasionali che i consumatori regolari. I primi sono rilevabili per un periodo da due a cinque giorni. I secondi sono rilevabili per un periodo che può estendersi a diverse settimane (fino a 10 settimane). La possibilità di rilevare l'uso della cannabis su un periodo molto esteso è il vantaggio del test su urina.

## • Contenuto del kit

La confezione contiene un foglio illustrativo da leggere e seguire attentamente per ottenere un risultato affidabile e due sacchetti ermeticamente sigillati, da aprire solo al momento del test e contenenti ognuno:

- un dispositivo di screening
- una pipetta in plastica monouso
- una bustina anti-umidità


Non aprire la bustina anti-umidità.

## • Precauzioni per l'uso

1. Non ingerire il TEST CANNABIS SU URINA MEDISUR.
2. Leggere attentamente le istruzioni.
3. Il test deve essere conservato tra 2 °C e 30 °C. Non deve essere congelato.
4. Il test deve essere utilizzato prima della data di scadenza riportata sulla confezione e sul sacchetto.
5. Il test deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini. Smaltire tutti gli elementi nel cestino dopo l'uso.

## • Procedura

1. Raccogliere l'urina in un contenitore pulito (ad esempio in un bicchiere di plastica), evitare il primo getto.
2. Aprire il sacchetto di alluminio (nella posizione della tacca), estrarre la cassetta test, metterla su una superficie piana e buttare la bustina anti-umidità.
3. Servirsi della pipetta per raccogliere e trasferire 3 gocce di urina nel pozzetto campione, tenendo la pipetta in posizione verticale.

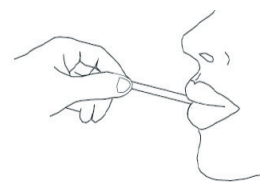

4. Leggere il risultato sulla finestra di lettura 5 minuti dopo aver trasferito l'urina. Non interpretare oltre i 10 minuti.



5. Chiudere il test con il cappuccio e tenerlo orizzontale per 10 minuti, quindi interpretare i risultati. Non interpretare oltre i 20 minuti.


## • Interpretazione del risultato

### POSITIVO



Il test è positivo quando appare una singola banda nella finestra di lettura sotto il segno C (Controllo). Questo risultato significa che l'urina contiene derivati della cannabis in una concentrazione superiore alla soglia, sopra la quale l'attenzione rischia di essere perturbata, in particolare per alcune attività richiedenti alta concentrazione. In questo caso, non dovrebbe intraprendere alcuna azione che richieda la sua piena attenzione o concentrazione, come guidare un veicolo.

### NEGATIVO


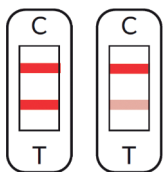


Il test è negativo quando nella finestra di lettura appaiono due bande sotto i segni T (Test) e C (Controllo). Ciò significa che l'urina non contiene prodotti derivati dalla cannabis o ne contiene una quantità inferiore alla soglia di 50 ng/ml.

**L'intensità della linea T può essere inferiore all'intensità della linea C:** questo non influisce sul risultato ottenuto.

### INVALIDO

Il test è invalido se non appare alcuna banda o se appare solo una banda nella finestra di lettura sotto il segno T (Test). Molto spesso questo accade quando non vengono seguite le istruzioni nel foglio illustrativo. Leggere attentamente le istruzioni e ricominciare con un nuovo TEST CANNABIS SU URINA MEDISUR.

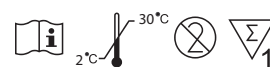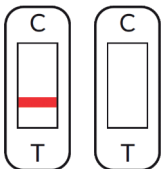

[contact@medisur.fr](mailto:contact@medisur.fr)  
+33 4 42 96 09 68  
[www.medisur.fr](http://www.medisur.fr)



**MEDISUR**  
100 Impasse des Houillères  
13590 Meyreuil, Francia

ref.NICO\_01  
rev. 01/2020

 JEUNE ENTREPRISE  
**FRANÇAISE**